



フォナック オーデオ パラダイス  
パラダイスで出会う、  
かけがえのない音。



A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on



あなたが聞きたいのは、どんな声？

懐かしい友人の声ですか。

新しい門出を迎えた家族の、歓喜に満ちた声。  
それとも、言葉を覚えはじめたお孫さんのかわいい声。

耳を傾けていたいのは、どんな音？

潮風と打ち寄せる波、聞いているだけで癒されるような音。

季節を感じさせてくれる、鳥のさえずりや虫の音。

旅先の街で出会った、演奏家たちの美しい旋律。

あなたの心を動かす音に、ふたたび出会ってほしい。

素晴らしい音の世界を、ありのままに感じてほしい。

そんな想いを込めた特別な補聴器ができました。

人生を豊かにしたい。  
世界にひとつだけの音で。

Phonak Audéo™ Paradise

フォナック オーデオ パラダイス



フォナック オーデオ パラダイスの  
世界観を表現した動画を公開しています。




パラダイスがかなえた、  
世界にひとつだけの音。



最新のハードウェアと最新のオペレーティングシステム。  
フォナック オーデオ パラダイスがお届けする音の世界は、  
すべてを一新した聴覚テクノロジーによって生まれました。

## ハードウェア

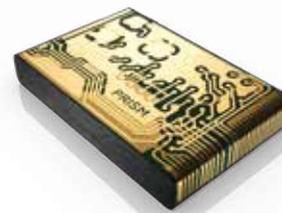

### 新チップ PRISM™(プリズム)

チップは補聴器の頭脳。  
だからフォナックは自社開発にこだわる数少ない補聴器メーカーです。  
新開発のプリズムは従来の2倍のメモリを搭載。より自然で快適な聞こえや優れた接続性を実現しています。



### モーションセンサー\*

フォナック オーデオ パラダイスは、着けている人が歩いていることを感知するモーションセンサーを搭載。モーションセンサーヒアリングとタップコントロールという新機能を司っています\*。

## オペレーティングシステム



### オートセンス OS 4.0

周囲の音環境を分析し、最適なプログラムを自動的に選択・ブレンドするフォナック独自のオペレーティングシステム「オートセンス OS」も第4世代に進化。3つの機能が新登場。

- モーションセンサーヒアリング\*
- ダイナミックノイズキャンセル
- スピーチエンハンサー

詳しくは次のページへ

並んで歩きながら、  
自然に話せるっていいね。



散歩のときに!  
**NEW** モーションセンサーヒアリング



旅先の街を歩きながら、

いろいろなことを話すのは楽しい時間だ。

これまでの補聴器だとしっかり聞きたいときは  
相手のほうに顔を向けていたが、  
パラダイスはその必要がないという。  
私の代わりに、補聴器が  
横を向いてくれる感じらしい。\*


モーションセンサーヒアリング\*は、  
補聴器を着けている人が  
立ち止まっているか、歩いているかをセンサーが感知。  
歩いているときは、刻一刻と変わる話し手の位置に  
適応するため、マイクロホンが音を拾う方向を  
自動的に 360° にひろげてくれるので、  
**一緒に歩いている人の声が聞き取りやすくなります。**



モーションセンサー  
ヒアリング

歩いているとき **ON**

側方の声に反応するので  
横を向かなくてもいい

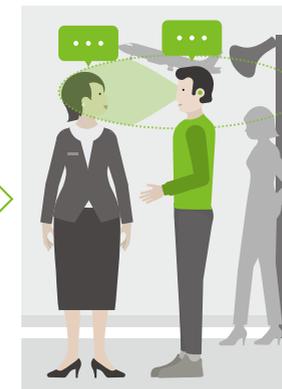

モーションセンサー  
ヒアリング

立ち止まっているとき **OFF**

マイクロホンは  
正面方向の声に反応



モーションセンサー  
ヒアリング

再び歩き始めると **ON**

\*:モーションセンサーヒアリングは[充電式]フォナック オーデオ P-Rのみの機能です。  
詳細はP15をご覧ください。

話が弾むね。

友人の声がよく聞こえると。



とても騒がしい場所で!  
**NEW** ダイナミックノイズキャンセル

たとえばショッピングセンターやレストランなど  
周囲がとても騒がしいと、会話を聞き取るのは大変です。  
**ダイナミックノイズキャンセル**は、  
側方や後方からの騒音を抑えて、  
**正面で話している人の声を自動的に聞き取りやすくします。**  
さらにマイフォナック アプリを活用すれば、  
スマートフォンで聞こえ方を自分で調節することもできます。




周囲が騒がしくてよく聞こえないとき



ダイナミックノイズキャンセルが働いて話者の声を聞き取りやすく



自分の好みやその場の環境に合わせて、スマートフォンで調節も可能

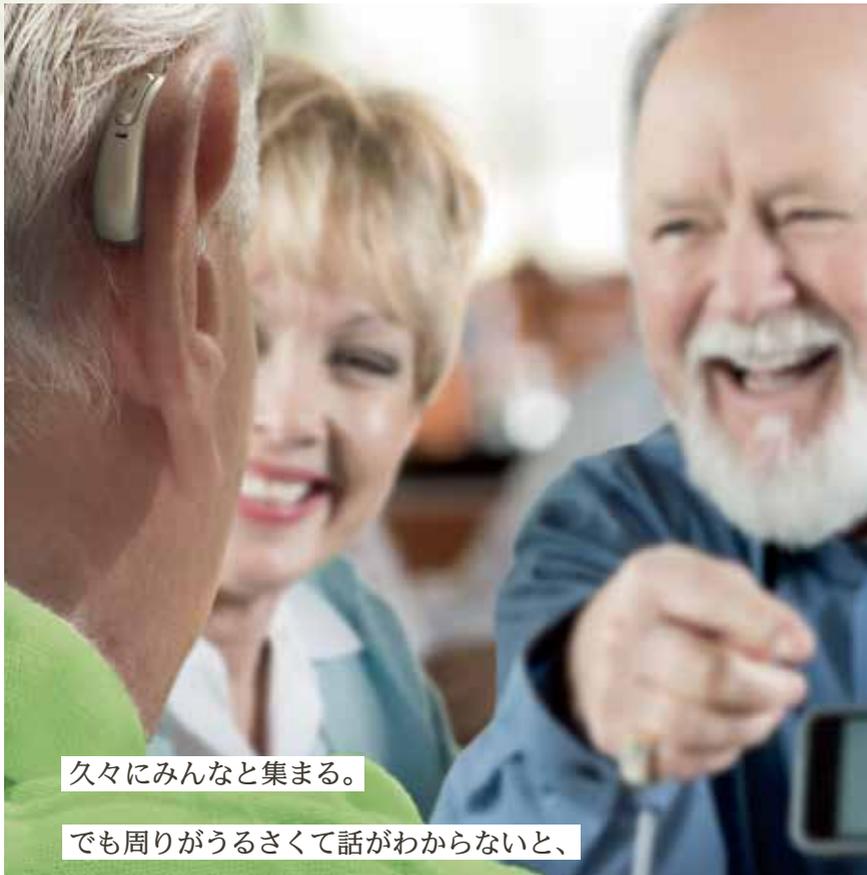

久々にみんなと集まる。

でも周りがうるさくて話がわからないと、

ストレスを感じるものだ。

そんなとき、パラダイスは

前にいる友人の声を

聞き取りやすくしてくれる。

会話も自然と弾むのだ。



静かな場所で!  
NEW スピーチエンハンサー

## あ、妻が歌ってる。



静かな午後。

ランチのしたくをしていると、

妻がささやくように


歌っているのに気がついた。

ちょっと懐かしいメロディ。

特別なことではないが、

何だか嬉しかった。

実は静かな空間でも、相手が小声だったり、離れたところにいるときには聞き取りにくいものです。  
スピーチエンハンサーは、そんな悩みに応える新機能。  
静かな場所での小さな声を増幅することで、  
家族や友人など親しい人との  
なにげない会話をより聞き取りやすくしてくれます。

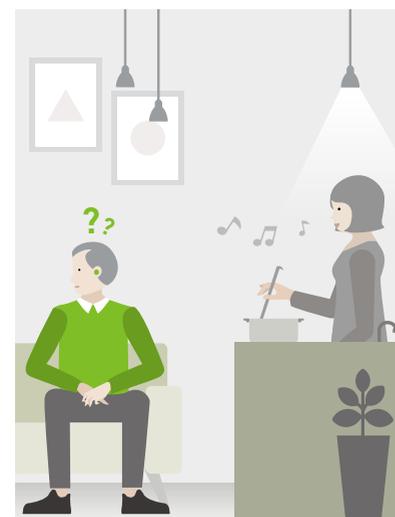

スピーチエンハンサー OFF

静かな環境でも、ささやくような声は聞き取りにくい



スピーチエンハンサー ON

ことばを強調してくれるので  
小声も聞き取りやすい



iOS、Android™、フィーチャー・フォンを含むBluetooth®対応の携帯電話とペアリング\*2してハンズフリー通話が可能。電話に出たり切ったりの操作は補聴器上部をダブルタップするだけでOK。音楽ストリーミングの一時停止、再生もタップ操作で行えます。\*1

**NEW** 電話に出るときはダブルタップ\*1。

ロジャーマイクロホンからの音声を外部受信機なしで直接受信できるロジャーダイレクト\*3を搭載。会議や仲間との趣味の活動などで聞こえをサポートします。




ロジャーダイレクト\*3で、会議も快適。



ロジャー セレクト iN/ペン iN  
オープン価格

\*1:[充電式]フォナック オーデオ P-Rのみの機能です。  
\*2:接続状況や携帯電話の Bluetooth® のバージョンによって接続できない場合がございます。  
\*3:ロジャーダイレクト機能を利用するには、ロジャー受信機の機能を補聴器にインストールする必要があります。  
IOS は Cisco Technology, Inc の商標です。Android は Google LLC の商標です。Bluetooth®は Bluetooth SIG, Inc.の商標です。

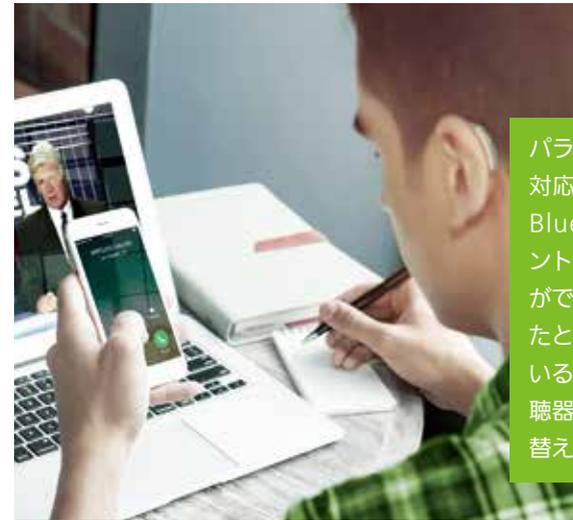

パラダイスは最大8台のBluetooth®対応機器とペアリング、そして2台のBluetooth®対応機器とマルチポイントペアリング(同時待ち受け状態)ができます。たとえばPCとつないで音楽を聴いているときに電話がかかってきたら、補聴器に着信音が届くので、即座に切り替えて対応することができます。

**NEW** PCとスマートフォン、2台同時にBluetooth®対応機器の待ち受けが可能。

マイフォナック アプリをダウンロードすれば、スマートフォンが補聴器のリモコンに。音量調節や音を自分好みにカスタマイズできます。

マイフォナックアプリのダウンロードはこちら



iOS



Android™



スマートフォンで音をカスタマイズ。

テレビや映画を「いい音」で楽しむ。テレビコネクターDが、テレビの音声を直接補聴器に届けます。



テレビコネクターD  
本体価格 20,000円(税抜)

# フォナック オーデオ パラダイス

## 耳かけ型 RIC タイプ

**充電式**

急速充電×長時間作動。  
補聴器は、いまや充電式がスタンダードです。

**IP68**  
防水・防塵

(補聴器のみ)

多彩な機能を搭載した最新の充電式。

**P-R** 指向性  
ワイヤレス通信

使用電池：リチウムイオン(充電式)  
期待動作時間：18時間\*1

【製品コード】  
P90:050-0771-XX P70:050-0794-XX  
P50:050-0793-XX P30:050-0792-XX



原寸大

標準タイプ充電器

乾燥・充電が一度にできる保管ケース。

**チャージャーケース Combi**

追加購入、買い替えも可能です。  
別売価格 12,000円(税込)  
【製品コード】075-0040



オプション

持ち運び可能な予備用充電パック。

**パワーパック**

11,000円(税込)  
【製品コード】071-0003  
※充電式補聴器を4回フル充電できます。



オプション

おしゃれなデザインで、旅行にもぴったりのコンパクト充電器。

**ミニチャージャーケース**

12,000円(税込)  
【製品コード】075-3015-10



オプション

オーダーメイド耳せんを使用する場合も余裕で収納。

**チャージャー BTE RIC**

12,000円(税込)  
【製品コード】075-3016-10



**電池式**

電池交換でいつでも使用可能に。

**IP68**  
防水・防塵

小さめのものをお求めの方に。

**P-312** 指向性  
ワイヤレス通信

使用電池：PR41(312)  
電池寿命：65~90時間

【製品コード】  
P90:050-0769-XX  
P70:050-0788-XX  
P50:050-0787-XX  
P30:050-0786-XX



原寸大

ヒアリングループなどを活用できるTコイル搭載。

**P-13T** 指向性 Tコイル標準  
ワイヤレス通信

使用電池：PR48(13)  
電池寿命：100~150時間

【製品コード】  
P90:050-0770-XX  
P70:050-0791-XX  
P50:050-0790-XX  
P30:050-0789-XX




原寸大

■カラーバリエーション ※標準色は(P6)シルバーグレー



■適応聴力

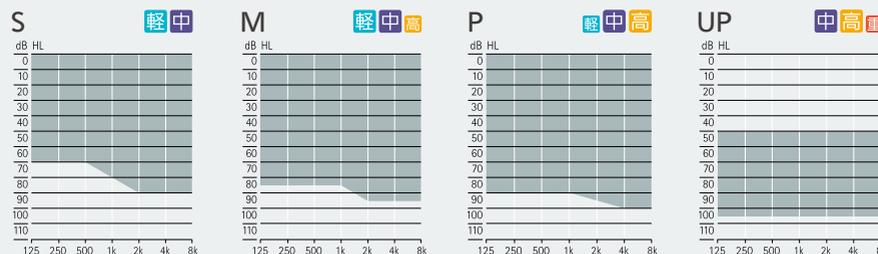

■価格

クラス	チャンネル数	オーデオ P-R(充電式)			オーデオ P(電池式)
		補聴器(非課税)*2	チャージャーケース Combi(税込)	合計	補聴器(非課税)*2
P90 (プレミアム)	20ch	片耳 568,000円	12,000円	580,000円	片耳 538,000円
P70 (アドバンス)	20ch	片耳 410,000円		422,000円	片耳 382,000円
P50 (スタンダード)	16ch	片耳 295,000円		307,000円	片耳 272,000円
P30 (エッセンシャル)	12ch	片耳 202,000円		214,000円	片耳 182,000円

\*1:フル充電時。使用状況によって異なります。\*2:UPIにはSPシェルが必要です。S、M、Pの場合、SPシェルはオプションで選択が可能です(いずれも別途、代金がかかります。補聴器と同時購入の場合、アクリルシェルは10,000円(非課税)、チタンシェルは13,500円(非課税)、別購入の場合はレシーバ代金を含めアクリルシェルは20,000円(税抜)、チタンシェルは23,500円(税抜)。  
●補聴器は両耳装用をおすすめします。●防水・防塵性能は、完全防水とは異なります。●電池寿命は使用状況により異なります。  
●オーデオ P-Rの充電電池交換は、20,000円(非課税)です(保証期間内は無償)。●補聴器は非課税です。

# 機能一覧

フォナック オーディオ パラダイス(耳かけ型 RICタイプ)

		P90	P70	P50	P30
マニュアルプログラム数		4	4	4	4
両耳装着機能*1	非常に騒がしい中でのことば	●	●		
	全方向(360°)からのことば	●	●		
	デュオフォン	●	●	●	
	クイックシンク	●	●	●	●
指向性	ウルトラズーム*2	P(33ch)	A(12ch)	S(6ch)	E(1ch)
自動環境適応機能	オートセンス OS 4.0				
	静かな環境	●	●	●	●
	騒音下でのことば	●	●	●	●
	騒音下での快適性	●	●	●	
	音楽	●	●		
	反響する環境での快適性	●			
	非常に騒がしい中でのことば*1	●			
	車の中でのことば	●			
	オートセンス OS 4.0(ストリーミング)				
	メディア ことば	●	●	●	●
メディア 音楽	●	●	●	●	
学習／記録機能	自動順応マネージャ	●	●	●	●
	ユーザー志向のチューニング	●	●	●	●
	データログ	●	●	●	●
騒音／ハウリング抑制機能	ダイナミックノイズキャンセル	●			
	スピーチエンハンサー	●			
	ノイズブロック	●	●	●	●
	ホイッスルブロック	●	●	●	●
	エコブロック	●			
	ウインドブロック	●	●		
快適機能	モーションセンサーヒアリング*3	●	●	●	
	サウンドリカバー2	●	●	●	●
	サウンドリラックス	●	●		
	リアルイヤーサウンド	●	●	●	
その他の機能	タップコントロール*3	●	●		
	多機能ボタン	●	●	●	●
	ロジャードイレクト	●	●	●	●
	Bluetooth®	●	●	●	●
	防水・防塵	IP68	IP68	IP68	IP68
	ナノコーティング	●	●	●	●
	Tコイル*4	●	●	●	●
	リモートサポート	●	●	●	●
	マイフォナック アプリ	●	●	●	●

# 性能一覧

フォナック オーディオ パラダイス(耳かけ型 RICタイプ)

製品名	最大音響利得 (50dB入力)		90dB入力最大出力 音圧レベル		誘導コイル 感度	使用電池	期待動作時間/ 電池寿命 (時間)
	最大値(ピーク値) (+ 3dB以下)	HFA-FOG (± 5dB以内)	最大OSPL90 (+ 3dB以下)	HFA-OSPL90 (± 4dB以内)			
P-312 S	47	40	111	106	-	PR41 (312)	65~90
P-312 M	51	46	114	111	-	PR41 (312)	65~90
P-312 P	59	56	122	120	-	PR41 (312)	65~90
P-312 UP	71	65	132	124	-	PR41 (312)	65~90
P-13T S	47	40	111	106	64	PR48 (13)	100~150
P-13T M	51	46	114	111	70	PR48 (13)	100~150
P-13T P	59	56	122	120	81	PR48 (13)	100~150
P-13T UP	71	65	132	124	90	PR48 (13)	100~150
P-R S	47	40	111	106	-	リチウムイオン (充電式)	18*5
P-R M	51	46	114	111	-	リチウムイオン (充電式)	18*5
P-R P	59	56	122	120	-	リチウムイオン (充電式)	18*5
P-R UP	71	65	132	124	-	リチウムイオン (充電式)	18*5

\*1:両耳装着時の機能です。

\*2:「P」「A」「S」「E」は、それぞれ「プレミアム」「アドバンス」「スタンダード」「エッセンシャル」を表します。

\*3:充電式のP-Rのみとなります。

\*4:P-13Tのみとなります。

\*5:フル充電時。使用状況によって異なります。

●本データはJIS C 5512:2015の2cmカプラにより測定、表示してあります。

●最新のフィッティングソフトウェアは、Phonak Target 7.0です。

●詳しくは当社ホームページを  
ご覧ください。  
[www.phonak.com/jp/ja](http://www.phonak.com/jp/ja)



# フォナックなら充実したアフターサービスで ご購入後も安心!

## リモートサポート

お客様のスマートフォンやタブレットPCと販売店のPCをインターネットで接続し、補聴器専門家による調整を自宅にいながらリモート(遠隔)で受けることができます。



ユーザー/自宅

補聴器専門家/お店

声は聞こえるんだけど、  
ことばがハッキリしないのですが・・・

では、補聴器を調整しますね。

フォナック オーデオ パラダイスは、マイフォナック アプリの機能の中の「リモートサポート」がご利用いただけます。外出が難しい状況などでとても便利です。

マイフォナックアプリのダウンロードはこちら



iOS



Android™

## フォナック あんしんサポート

保証期間満了後も、下記の期間中は修理の上限価格を超える費用を請求いたしません。

		内容	(お買い上げ日より) 1年目	2年目	3年目	4年目
オーデオ パラダイス	90	修理サポート	フォナック「プレミアム保証」3年間無償			あんしん修理サポート*1 1年 (40,000円まで)
		紛失・盗難・全損時 リニューアルサポート*2	割引率50%	割引率30%		
	70	修理サポート	2年間無償			あんしん修理サポート*1 2年 (1年目20,000円まで、2年目40,000円まで)
紛失・盗難・全損時 リニューアルサポート*2		割引率50%	割引率30%			
	50/ 30	修理サポート	2年間無償			あんしん修理サポート*1 2年 (1年目20,000円まで、2年目40,000円まで)
ワイヤレス アクセサリ		修理サポート	1年間無償			

\*1: 積算修理はあんしん修理サポートの対象外となります。積算修理についての詳細は販売店までお問い合わせください。

\*2: 紛失・盗難・全損時リニューアルサポートには、保証書のほか、遺失届/盗難届等の証明書類が必要です。

● RICタイプのSPシエルの再作は有償(アクリルシエルは10,000円(非課税)、チタンシエルは13,500円(非課税))です。

● ご購入後、補聴器のカラー変更に伴うケース交換は有償(5,000円(非課税))です。



## 良い聞こえから始まる健康でしあわせな毎日

良い聞こえは人生のさまざまな側面にプラスの影響をもたらします。フォナックは、ウェルビーイングを支える3つの側面に沿って、難聴者のより豊かな人生の実現のために行動します。



**社会・感情的  
ウェルビーイング**

良い聞こえは、アクティブな活動や人々とのつながり、スムーズなコミュニケーションに欠かせません。



**認知的  
ウェルビーイング**

良い聞こえは、脳が聞き取りやことばの理解を行い、刺激された状態を保つために大切です。



**身体的  
ウェルビーイング**

良い聞こえは、さまざまな音環境に適応し、周囲の状況が把握しやすくなるため、安心感と自信が生まれます。

ウェルビーイング (well-being) : 「ウェルビーイング」とは、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることを意味する概念です。

あなたの人生に、  
素晴らしい音の世界を。



## life is on

フォナックは、よりよい聞こえが人々の健康に深くつながり、人生を豊かにするために欠かせないものと考えています。そのため、私たちは70年以上にわたり、補聴器やワイヤレス通信機器などの研究開発に情熱を傾けてきました。これからも、聞こえに悩むすべての人々のアクティブで健康的な毎日を支え、前向きな心と豊かな感性を育むために、革新的な聞こえのソリューションをお届けします。

製造販売業：ソノヴァ・ジャパン株式会社  
〒140-0002 東京都品川区東品川2-5-8  
天王洲パークサイドビル  
法人のお客様窓口 TEL:0120-04-4079  
個人のお客様窓口 TEL:0120-06-4079  
(受付時間：月～金 9:00～17:30 土日祝休み)  
FAX:0120-23-4080  
許可番号 [13B2X10021]

フォナック製品のご相談・ご用命は…



フォナックの最新情報はSNSでチェック!

 Facebook @phonakjapan

 Instagram @phonak\_japan

※補聴器は、個々の難聴や「聞こえ」の程度に合わせて調整(フィッティング)することが必要です。※補聴器は適切なフィッティング調整により、その効果が発揮されます。しかし、装着者の「聞こえ」の状態によっては、その効果が異なる場合があります。

●本カタログ掲載の各製品の仕様は予告なく変更される場合があります。●本カタログ掲載の写真は日本仕様と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。



このカタログは、イワタUDフォントを使用しています。UD(ユニバーサルデザイン)とは、年齢・性別や、障害の有無に関係なくあらゆる人が商品・サービス・住居・施設を快適に利用できるよう配慮されたデザインのことです。イワタUDフォントは、ユニバーサルデザインの視点で作られた文字フォントです。

本カタログの内容は2020年12月現在のものです。

**sonova**  
HEAR THE WORLD



028-2206-17

2020125-80000